

**PHILIPS**

Lumea

Advanced



一般家庭用光美容器  
フィリップス  
ルメア アドバンス

品番 **SC1998/70,**  
**SC1997/70**

**取扱説明書**

**保証書付**

保証書は、この取扱説明書の最  
終ページについておりますので  
販売店で記入を受けてください。

この製品は、下記肌色チャート内の⑤印がついている肌色・体毛の色には適していません。製品を初めてご使用の際または日焼けをした後は、下記肌色チャートをご確認のうえ、必ず使用前にスキンテストを行い肌の状態を確認してください。光を照射し、温かさや少し熱さを感じる程度であれば問題ありませんが、痛みを感じるような出力レベルでは使用しないでください。下記を確認していただき、適切な出力レベルに設定してからご使用ください。

## 肌色チャート(推奨出力レベル)

肌色 スキンタイプ 特徴	ホワイト スキンタイプⅠ きわめて 明るい肌色	ベージュ スキンタイプⅡ 明るい肌色	ライト ブラウン スキンタイプⅢ 標準的な肌色	マイルド ブラウン スキンタイプⅣ 小麦色	ダーク ブラウン スキンタイプⅤ 褐色	黒色に近い ブラウン スキンタイプⅥ
体毛の色						
白色/灰色	×	×	×	×	×	×
赤色	×	×	×	×	×	×
明るい金色	×	×	×	×	×	×
濃い金色/明るい茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	×	×
茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	×	×
濃い茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	×	×
黒	4/5	4/5	4/5	3/4	×	×



### 注意

- ご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 健康状態や、服用している薬によっては、製品が使用できない場合があります。
- P.5~8の「必ずお守りください」のページをよくお読みください。

フィリップス ルメアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 商品のご確認

商品をご確認ください。

本体



電源アダプタ



からだ用アタッチメント  
(専用のフィルターは付いていません)



ビキニエリア用アタッチメント  
※SC1998/70のみ



ポーチ



掃除用クロス

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 目 次

●はじめに	商品のご確認 ..... 3 目次 ..... 4 必ずお守りください ..... 5~8 各部の名称 ..... 9・10
●ご使用方法	日焼けについて ..... 11 お手入れの準備 ..... 12・13 製品の使いかた ..... 14~17 お手入れのためのガイドライン ..... 18~20 製品のメンテナンス方法 ..... 21 保管のしかた ..... 22
●廃棄について	製品を廃棄するとき ..... 22
●困ったとき	困ったとき ..... 23~26
●保証	保証とアフターサービス ..... 27 仕様 ..... 28 無料修理規定 ..... 30 保証書／フィリップスサポートセンター ..... 最終ページ

# 必ずお守り ください

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

### ○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。

図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



#### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



#### 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。



記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

## 警告



- メンテナンスの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



- 電源アダプタが傷んだり、コンセントの差みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



- 電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



- 本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



- 電源コネクタ受部にピンやごみ、ほこりを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないでください。発熱による火災の原因になります。



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。



- 乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



- お子様がこの製品で遊ばないように管理してください。



- 光のぞきこんだり、人に向けたりしないでください。目を傷める原因となります。



- 製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



- 自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させないでください。また、おからだの不自由な人だけでは使用しないでください。事故やケガの原因になります。

## ⚠ 注意



- 電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



- 使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



- 使用するときは、専用の電源アダプタを使用してください。



- 電源アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型部品をお求めください。



- この製品が破損または故障した場合は、使用しないでください。ケガの原因になります。



- 製品本体に強いショックを与えたとき、落としたり、激しく振ったりしないでください。



- 15歳未満の方は使用しないでください。15~18歳の方は保護者同意の上、保護者監視のもとでお使いください。

## ⚠ 使用上のご注意

1. この製品は顔(鼻下、あご、もみあげ)、ワキの下、腕、腹部、ビキニエリ亞、脚の除毛後のお手入れをするためのものです(男性は顔には使用できません)。それ以外の目的で使用しないでください。

2. この製品を、浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しないでください。

3. この製品の使用は室温15°C~35°Cの環境下で行ってください。

4. 同じ箇所に一度のお手入れで2回以上使用しないでください。  
また、お手入れ頻度については、P.19「お手入れの頻度」の項をお読みください。

5. 通風孔をふさがないでください。本体が過熱して故障の原因になります。

6. 日焼けをしてから約2週間はこの製品を使用しないでください。詳しくはP.11「日焼けについて」の項をお読みください。

7. 肌以外のものに向けて光を照射しないでください。故障の原因になります。

8. ご自身の肌タイプに合った出力レベル設定でお使いください。それよりも高い出力レベル設定でご使用になると、肌トラブルのリスクが高まります。

9. 暗いところでは使用しないでください。目に一時的な刺激を感じことがあります。

10. 衛生上、この製品を他の人と共有しないでください。

## お手入れの際のご注意

- この製品は水洗いできません。水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。
- この製品は、使用の都度、掃除をしてください。

## 保管時のご注意

- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- ポーチに入れてほこりがつきにくい場所で保管してください。詳しくはP.22「保管のしかた」の項をお読みください。



下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください

- 顔（鼻下、あご、もみあげ以外）、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、膣部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体、男性器
- シリコン注入物、ベースメーカー、皮下埋め込み式カテーテル（ポート）、ピアス、ボディピアス
- いばら、ほくろ、そばかす、大静脉、しみ、濃い色素斑の見られる箇所、傷跡、皮膚に異常の見られる箇所
- 刺青（タトゥー）、ボディペイント、アートメイクのある箇所
- 長時間効果が持続する制汗剤を使用している箇所




下記に該当する方は、この製品を使用しないでください

1. 妊娠中、授乳中の方
2. お手入れ箇所の肌色・毛の色が適さない方
  - 生来の毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方
  - スキンタイプV（スキンタイプ5）またはVI（スキンタイプ6）と診断されたことがある方、または元の肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方
3. 現在医師の治療を受けている方
4. 皮膚がんまたはお手入れしようとする範囲に何らかのがん疾患がある方
5. お手入れしようとする範囲にがんの兆候または異常なホクロがある方
6. 心臓に疾患のある方
7. お手入れしようとする範囲に下肢静脈瘤、血管拡張症などの血管病の既往歴がある方
8. 光に対して過度に敏感または発赤しやすい方、アレルギー反応のある方
9. お手入れしようとする範囲に皮膚感染、アトピー、やけど、毛根の炎症、裂傷、ヘルペスなど皮膚疾患のある方
10. お手入れしようとする範囲を過去3週間以内に手術した方
11. 出血障害のある方
12. 皮膚のケロイド症状、創傷治癒欠損などの膠原病の既往歴がある方
13. 糖尿病、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症、うっ血性心臓病などの疾患がある方
14. HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、またはAIDS（後天性免疫不全症候群）既往の方
15. ヒアルロン酸、ベータヒアルロン酸、イソトレチノイン、アゼライン酸で皮膚を治療中の方
16. イソトレチノインを使用したにきび・酒さなどの治療を過去6ヶ月以内に受けた方
17. 鎮痛剤の服用をしている方
18. 感光性を強める性質のある薬を使用している方
19. 抗凝血剤を使用している方やアスピリンを多用する方
20. 免疫抑制剤を使用している方


※ご自分がこの製品の使用に適するかどうか不明な場合、また、使用中に異常を感じた場合は、皮膚科医にご相談ください。

## 各部の名称

### 本 体

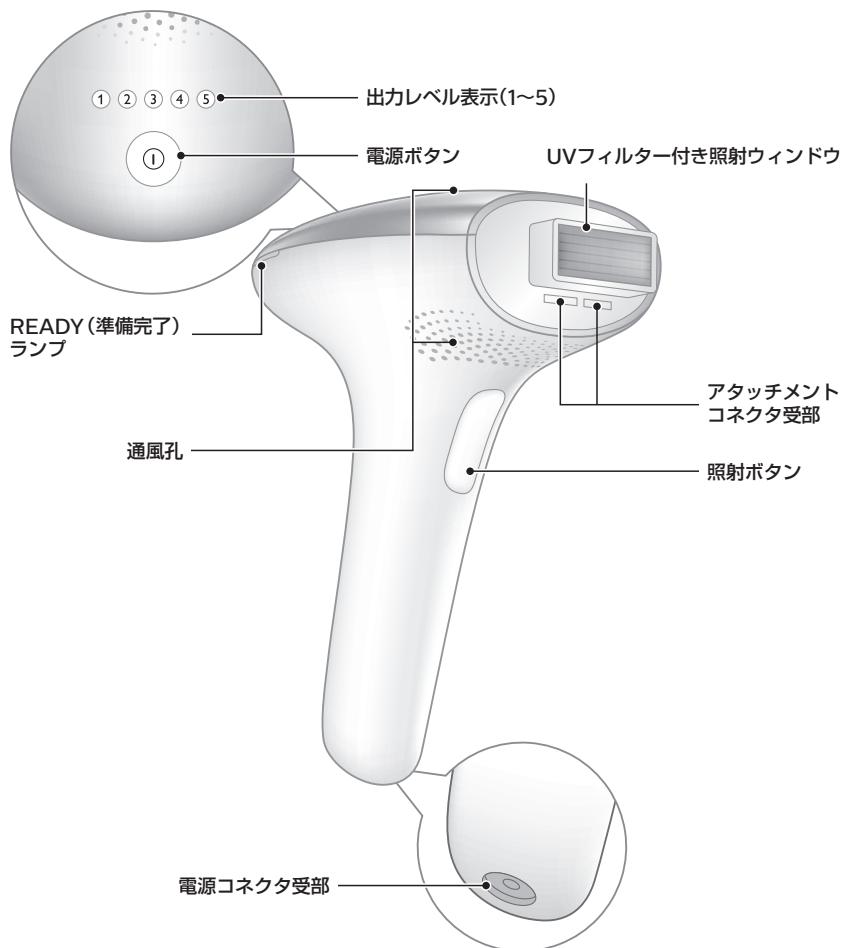


## アタッチメント

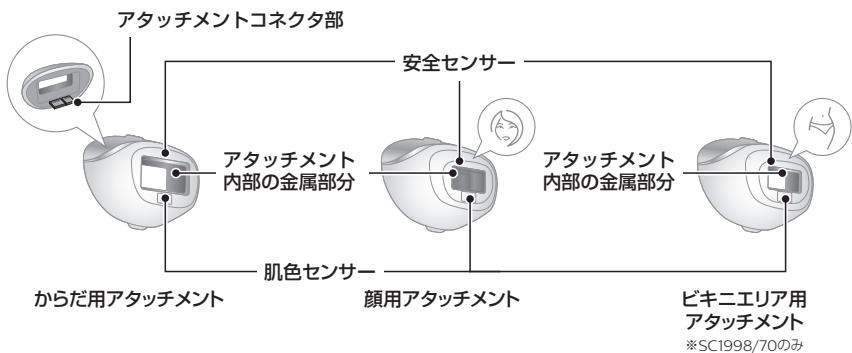

※アタッチメントを本体に取り付ける際にはアタッチメントコネクタ部を傷つけないようにご注意ください。

## 電源アダプタ

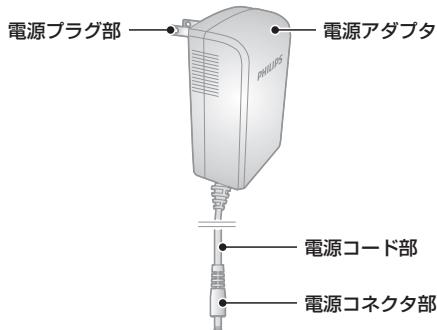

## ポーチ




## 掃除用クロス



# 日焼けについて

## ●製品を使用する前に日焼けをした場合

日焼けをした後は、最低2週間あけてからこの製品を使用してください。  
製品を使用する前に、お手入れする箇所にスキンテストをし、日焼けした後の肌色に合わせて適切な出力レベルに調節してください(P.12・13「スキンテストのしかた」の項をお読みください)。

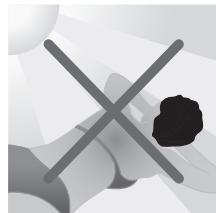

## ●お手入れ後の日焼けと紫外線ケア

お手入れ後、48時間は日焼けをしないようにしてください。また、外出する際はお手入れした部位にSPF50以上の日焼け止めを塗り、お手入れした箇所が紫外線に当たることを避けてください。48時間経った後でも赤みなどが見られる場合は紫外線を避けてください。その後も約2週間程度はSPF30以上の日焼け止めを塗り肌を保護してください。

※SPFとはSun Protection Factor (サン プロテクション ファクター)の略で紫外線防御指數とも言います。日焼け止め乳液などに表記されている、紫外線の防止効果を表す指標です。

## ●クリームによる日焼け


タンニング(日焼け)を促進するクリームなどを使うといった人工的なタンニングをした場合は、その日焼けが引くまで待ってからこの製品をお使いください。また、上記「製品を使用する前に日焼けをした場合」、「お手入れ後の日焼けと紫外線ケア」の手順に従ってください。

## お手入れの準備

### お手入れ箇所の準備

お手入れする部位の毛を剃ります。

- 事前に体毛を剃らなかったり剃り方が不十分だったりすると肌トラブルが生じるおそれがあります。また、汚れや体毛が製品内にたまります。
- 毛抜き、ワックスなどで脱毛をした場合、毛が再び生えてくるまではこの製品を使用しないでください。毛が伸びてきたら、脱毛クリームなどは使わずに毛を剃つてください。毛を適切に剃らずにこの製品を使用すると、本来の効果が得られません。
- 毛を剃った際に切り傷などができる場合、傷が治るまでその箇所はお手入れしないでください。

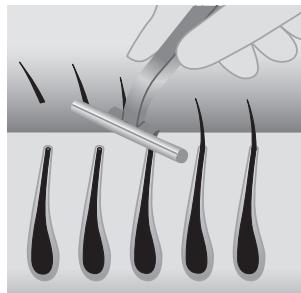

製品を初めてご使用の際または日焼けをした後は、使用前にスキンテストを行い、肌の状態を確認してください。スキンテストは、お手入れしたい部分に近い箇所を選んで行ってください。

### スキンテストのしかた

- 1 スキンテストする箇所を選びます。  
※お手入れしたい部分に適したアタッチメントを選んでください。P.14「適切なアタッチメントを選ぶ」の項をお読みください。  
※お手入れしたい箇所に近い部分の肌を選んでください。製品が扱いににくい部分や肌が敏感な箇所(膝や骨のある箇所)では、スキンテストを行わないでください。  
※「肌色チャート」については、P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

- 2** 電源ボタンを押して、電源をONにします。
- 3** 出力レベルが1に設定されていることを確認します(P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください)。
- 4** 製品を肌に直角になるように当てます。こうすることで安全センサーが肌に接触します。  
※安全センサーは、製品が肌に接触していない場合に、意図しない照射を防ぐためのものです。安全センサーが肌に正しく接触すると、READY(準備完了)ランプが白色に点灯します。
- 5** 照射ボタンを1度押して、光を照射します。
- 6** 次の箇所に製品をすべらせて移動します。
- 7** 出力レベルを1レベル上げ、照射ボタンを押します。  
※電源ボタンを押すことにより、出力レベルを変更できます。長押しすると電源がOFFになりますので、ご注意ください。
- 8** 再び次の箇所に製品をすべらせて移動させ、照射ボタンを押します。7~8の操作を繰り返し、レベル1から順にご自分の肌の「肌色チャート」に記載の出力レベルまで行います。
- 9** スキンテストが終了したら、電源ボタンを長押しして、電源をOFFにします。
- 10** スキンテスト後に24時間待ってから、肌の状態を確認します。皮膚に赤み・痛み・水疱などの異常が見られた場合は、異常が起きなかつた出力レベルを選んで今後のお手入れを行ってください。  
※前回お手入れしたときから、日焼けなどで肌の色が変わった場合は、再度スキンテストを行ってください。スキンテスト後は、30分程度待ってからお手入れを行ってください。

本製品は充電式ではありません。  
電源アダプタをつなげてからご使用ください。

## 製品の使いかた


この製品をご使用になる前に必ず、P.12「お手入れの準備」の項をお読みください。

※この製品は顔(鼻下、あご、もみあげ)、ワキの下、腕、腹部、ビキニエリア、脚の除毛後のお手入れをするためのものです(男性は顔には使用できません)。それ以外の目的で使用しないでください。

※光のまぶしさをやわらげるため、明るい室内でご使用ください。

### 適切なアタッチメントを選ぶ

#### ●からだ用アタッチメント

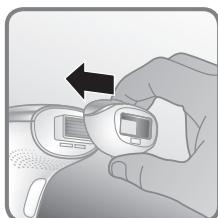


体の首より下の部位で広い範囲をケアするためのアタッチメントです。照射範囲が40cm<sup>2</sup>と広いので、面積の広い部位のお手入れに適しています(専用のフィルターは付いていません)。

※顔には使用しないでください。

※ビキニエリアにもご使用いただけます。

#### ●顔用アタッチメント

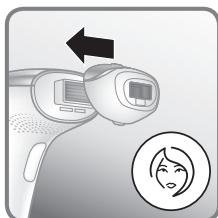


体の特に敏感な部分をケアするためのアタッチメントです。安全性を確保するための特殊光フィルターが採用されています。頬骨よりも下の顔の部分(鼻下、あご、もみあげ)などのお手入れに適しています。

※目の周り、眉毛の周りには使用しないでください。

※男性は顔にはお使いいただけません。

※鼻下をお手入れする際には唇に光が当たらないようにしてください。

#### ●ビキニエリア用アタッチメント (SC1998/70のみ)

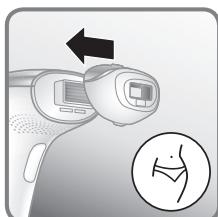

ビキニエリアのお手入れに適したアタッチメントです。

※顔には使用しないでください。



## 注意

- 例外として使用できない箇所については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。
- お手入れの際、ひどく痛みが生じる場合は、痛みを感じないレベルまで出力レベルを下げてください。赤みや肌トラブルがひどくなった場合には、お手入れをすぐに中止し、P.19「肌トラブルについて」の項をお読みください。

## 出力レベルの設定

- 1 下記「肌色チャート」をお読みいただき、出力レベルをご自身の肌や体毛の色に適した高さ、またご自分が快適に感じる(痛みを感じない)レベルに設定してください。  
「肌色チャート」の×印に当てはまる場合は、この製品の使用に適しません。
- 2 体の部位によっては出力レベルを変える必要があります。ご自分に合った無理のない出力レベルをご使用ください。光を照射し、温かさや少し熱さを感じる程度であれば問題ありませんが、痛みを感じるような出力レベルでは使用しないでください。肌の色が濃い方は、肌が光を吸収しやすい性質のため、無理な出力レベルで使用すると肌トラブルのリスクが高くなります。そのため、低い出力レベルでのご使用をおすすめしています。肌トラブルについては、P.19「肌トラブルについて」をお読みください。

肌色チャート(推奨出力レベル)

		肌色と特徴					
		ホワイト スキンタイプI ／きわめて 明るい肌色	ベージュ スキンタイプII ／明るい肌色	ライト ブラウン スキンタイプIII ／標準的な肌色	マイルド ブラウン スキンタイプIV ／小麦色	ダーク ブラウン スキンタイプV ／褐色	黒色に近い ブラウン スキンタイプVI ／非常に 日焼けしやすい
体毛の色	濃い金色／明るい茶色／茶色／濃い茶色／黒	4 / 5	4 / 5	4 / 5	3 / 4	×	×
	白色／灰色／赤色／明るい金色	×	×	×	×	×	×

ご自身がこの製品の使用に適しているかどうか判断するため、P.8「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」をお読みください。特に自然光や人工的な方法で日焼けを行った方は、肌色が前回のお手入れの時よりも濃くなっている可能性があります。上記「肌色チャート」をお読みいただき、スキンテストを行なってから適切な出力レベルに設定してご使用ください。

※P.1で色をご確認ください。

### 【肌色センサー】

本体の背部にあるREADY(準備完了)ランプがオレンジ色に点滅→点灯すると肌が製品の使用に適していないことを示しており、製品は自動的に停止します。日焼けしていない箇所で試してください。それでも使用できない場合はフィリップスサポートセンターにご連絡ください。

## 使用方法

- 1 ご使用前には毎回必ずアタッチメント部分(UVフィルター付き照射ウィンドウとアタッチメント内部の金属部分)を清潔にしてください。詳しい清掃のしかたはP.21「製品のメンテナンス方法」の項をお読みください。
- 2 お手入れ箇所に適したアタッチメントを選びます。
- 3 スキンテストの結果を参考に、ご自分に適した出力レベルを選び、肌の状態や反応のしかたを注意深く見ながら使用してください。  
※健康状態などにより肌の感じ方や反応のしかたは異なる場合があります。特に日焼けの後はご注意ください。  
詳しくはP.19「肌トラブルについて」の項をお読みください。  
※すべての出力レベル表示が交互に点滅し、出力レベルを変更できない場合はP.24「困ったとき」をご確認ください。
- 4 製品を肌に直角になるように当て、アタッチメントおよびアタッチメントの「安全センサー」が肌に当たるようになります。




### 【READY(準備完了)ランプ】

本体の背部にあるREADY(準備完了)ランプが白色に点灯すると、製品が肌にきちんと当たっており、光を照射する準備が整ったサインです。

※READY(準備完了)ランプがオレンジ色に点滅～点灯した場合は、お手入れしようとしている箇所の肌の色が本製品を使用するのに適していません。

※「安全センサー」がきちんと肌に当たらないとREADY(準備完了)ランプは点灯しません。

※1回1回の照射の間に、3～5秒ほどかかる場合もあります。

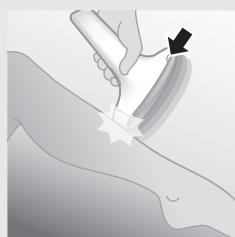

**5** 照射ボタンを押して光を照射します。照射のしかたは次の2種類から選べます。

#### 【連射モード】

照射ボタンを押したままにすると、光が一定間隔で自動的に照射され続けます。1箇所に照射したら、次の箇所へとすべらせて移動させます。

※同じ箇所に続けて光を照射しないようご注意ください。

お手入れ箇所：脚のような広い箇所をスピーディーにお手入れ



#### 【1回ずつ照射する基本モード】

「安全センサー」を肌に当て、照射ボタンを1度押します。1箇所に照射したら、次の箇所に移動させ、再び照射ボタンを押します。 お手入れ箇所：ひざ、足首などの部位を正確にお手入れ

※見えている光は、肌に反射したものですので目に害はありません。使用中にゴーグルなどをかける必要はありません。明るい部屋でご使用いただくとまぶしさは軽減されます。

※この製品にはオーバーヒートプロテクション(過度の温度上昇を防止する)機能がついているため、製品の温度が上がりすぎるとすべての出力レベルが同時に点滅し、照射ボタンを押しても光を照射することができません。この場合は、P.24「困ったとき」をご確認ください。


※1回のお手入れで、同じ箇所を何度も照射をしないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。

※鉛筆やペンで、照射する箇所に印をつけないでください。肌トラブルの危険性が高まります。

#### 【照射範囲】

お手入れしたい箇所が隙間なく照射されるよう、少しずつずらして照射してください。

※「安全センサー」が当たっている部分は、光が照射されません。

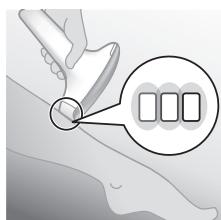

…「安全センサー」が当たる範囲

□ …光が照射される範囲

**6** お手入れが終了したら、電源ボタンを長押しして電源をOFFにしてください。

※電源を入れたまま放置すると約5分後に製品の電源が自動的に切れます。

**7** アタッチメントや、UVフィルター付き照射ウィンドウがほこりや毛などで汚れていないことを確認してください。


### お手入れ後のケア

お手入れ後にはてりやかゆみを感じる場合、保冷剤や濡れタオルなどで肌を冷やしてください。また、肌の乾燥を感じる場合は、保湿剤などで肌を保湿してください。

定期的にお手入れすることで  
なめらかな肌を維持できます。

## お手入れのための ガイドライン

### お手入れの平均的な所要時間とお手入れ箇所に適したアタッチメント

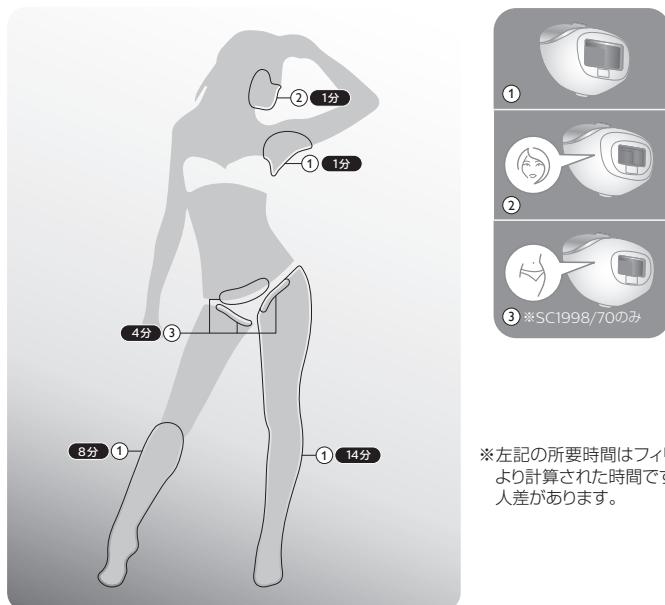

※左記の所要時間はフィリップス社実施のテストにより計算された時間です。実際の処理時間には個人差があります。



#### 注意

- 顔(鼻下、あご、もみあげ以外)、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、腹部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。
- その他の例外として使用できない箇所についてはP.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

## お手入れの頻度

最初の4~5回は2週間ごとにお使いください。その後は、4~8週間の間隔でお使いください。最適なお手入れの頻度は、個人の体質や身体の部位によっても差があります。お手入れの効果が感じられない場合はお手入れの頻度を上げることをおすすめします。



### 注意

本製品を1度使用し、お手入れした後は最低2週間は使用しないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。

※効果は使用する部位や個人によって異なります。

※お手入れを中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻ります。

## 肌トラブルについて

- わずかな赤みが出たり、ちくちく、ひりひりしたり、または多少熱く感じるといったことがありますか、通常はすぐにこれらの症状は消えて感じなくなります。
- やけどのような状態が少しの間あらわれることもあります。3日以内にこの症状がおさまらない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。
- 肌が乾燥したり、かゆみが出たりすることがありますか、これらの症状は除毛によるものと、光によるものとの組み合わせと考えられます。通常は数日でおさまりますが、かゆみに対しては肌を保冷剤や濡れタオルなどで冷やしてください。肌の乾燥が続く場合は、保湿剤などで肌を保湿するなどしてください。

## まれに起こる皮膚トラブル

やけど、皮膚の強い赤み、皮膚の腫れは、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。もしもこれらの症状が3日以内に消えない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

再び使用する場合は、完全に皮膚が健康な状態に戻ってから、弱い光で使い始めてください。

**皮膚の変色**：色素沈着(肌の色が濃くなる)または色素脱色(肌の色が薄くなる)は、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。

これらの症状があらわれた場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

**皮膚感染および炎症**：除毛の際などにできた傷のある箇所、元々傷があった箇所、埋没毛にこの製品を使用したことが原因で起こる可能性があります。

**極度の痛み**：お手入れ前に除毛をせずにこの製品を使用すると、強い痛みが生じる場合があります。また、ご自分の肌に適した出力レベルよりも高い設定でご使用になつたり、同じ箇所に2回以上照射したり、傷や炎症、感染症、タトゥー(刺青)、やけどなどのある箇所に使用しても、強い痛みが生じる場合があります。より詳しい情報については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」、P.8「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

## お手入れ後の注意

- お手入れ直後の箇所に、香水や化粧品を塗布しないでください。
- ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しないでください。赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
- 紫外線に当たる際の注意事項、また人工的な日焼けについては、P.11「日焼けについて」の項をお読みください。

# 製品のメンテナンス方法

本製品は水洗いできません。  
水や液体につけないでください。

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。




## 注意


- 本体の汚れは、付属の掃除用クロスや乾いた布で拭き取ってください。取れにくい汚れは水を含ませた掃除用クロスや布で拭き取り、その後水分を拭き取ってください。本体を水や液体に浸したり水洗いする事は故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- 電源アダプタは絶対に濡らさないでください。  
濡れてしまった場合は乾いた布で拭き取り完全に乾いてから使用してください。
- UVフィルター付き照射ウィンドウやその内部の金属部分に、傷をつけないでください。

1 電源をOFFにし、電源プラグを抜いて製品を冷ます。

※UVフィルター付き照射ウィンドウは使用中熱くなります。清掃を行う前に必ず冷ましてください。

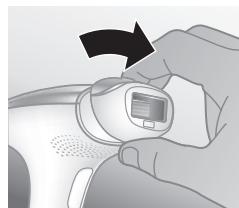

2 アタッチメントの上下のくぼみを指で押さえ、やさしく本体から取り外します。無理な力を加えなくても、アタッチメントは外れます。

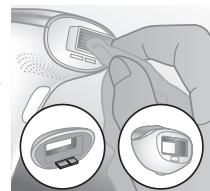

3 付属の掃除用クロスを少量の水で湿らせ、下記の部品をきれいにします。

- ・UVフィルター付き照射ウィンドウ
- ・アタッチメント内部の金属部分
- ・アタッチメントの外側
- ・顔用、ビキニエリア用アタッチメント(SC1998/70のみ)のフィルター部分

※製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。

※アタッチメントの細かな部分が付属の掃除用クロスで清掃しづらい場合は、綿棒を使っても結構ですが、繊維などが残らないように気をつけてください。

4 すべての部品を乾かします。

5 必要に応じて、本体外側を乾いた掃除用クロスできれいに拭いてください。

## 保管のしかた

- 1 電源をOFFにし、電源プラグを抜いて製品を冷します。
- 2 製品を清掃します。
- 3 製品をポーチに収納します。
- 4 0°C～40°Cの範囲の場所で、ほこりや湿気を避けて保管します。



### 注意

ほこりをふせぐため、ポーチに入れて保管してください。

## 製品を 廃棄するとき

- 古くなった本製品を廃棄するときは、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

## 困ったとき

ご使用中お困りになったとき、  
まずは下記をご確認ください。

### 電源ボタンを押しても作動しない

- ▶ 電源アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？  
本体の電源コネクタ受部に電源アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれているか確認してください。

### 電源をONにしたが、出力レベルの調節(強弱の変更)ができない

- ▶ 製品の電源をいったんOFFにし、再度電源をONにしてリセットしてください。

### アタッチメントを肌に当てても、白色のREADY(準備完了)ランプが点灯しない

- ▶ アタッチメントの「安全センサー」がしっかりと肌に当たっていますか？  
製品を肌に直角になるように当て、「安全センサー」がすべてしっかりと肌に接触していることを確かめてください。  
READY(準備完了)ランプが点灯したら、照射ボタンを押します。  
上記の方法でうまくいかない場合、例えばひじから下などの肌にぴったりと製品を当てやすい箇所で同じ動作を行  
い確認します。

### 使用中に製品本体が温かくなる

- ▶ 使用中製品本体が温かになります。そのままご使用ください。

### 出力レベル表示がレベル1で点滅し設定を変更できない

- ▶ アタッチメントが製品にきちんととはまっていますか。

## オレンジ色のREADY(準備完了)ランプが点滅～点灯し、照射ボタンを押しても光が照射できない

### ▶肌色センサーが反応し肌が製品の使用に適していないことを示しています。

日焼けしていない箇所で試してください。それでも使用できない場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。

## すべての出力レベル表示が交互に点滅する

### ▶プログラムエラーのおそれがあります。

製品の電源をいったんOFFにし、再度電源をONにしてリセットしてください。

## すべての出力レベル表示が同時に点滅し、照射ボタンを押しても光を照射できない

### ▶オーバーヒートプロテクション機能が起動しているおそれがあります。この症状が見られた場合は以下のことをお試しください。

- ① 製品の電源をいったんOFFにする。
- ② 電源アダプタをコンセントから抜く。
- ③ 15°C～35°Cの環境へ製品を移動させる。
- ④ 電源アダプタを再びコンセントに差し込み、製品の電源をONにする。
- ⑤ 上記①～④を行っても問題が解決しない場合は、約30分待ってから再度電源をONにする。

## 製品からおかしな臭いがする

### ▶アッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウが汚れていませんか？

アッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウを清潔にしてください。

### ▶お手入れ箇所をしっかりと除毛していますか？

お手入れ箇所の毛を除毛せずにこの製品を使用すると、毛が焦げて臭いがすることがあります。製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。

### ▶製品をほこりの多い場所に保管していませんか？

臭いは数回照射するうちに消えてなくなります。

## お手入れの最中に、いつもよりも肌が敏感に感じる

### ▶出力レベルが高すぎませんか？

ご自分に合った出力レベルを選んでいるか確認し、必要があれば出力レベルを低くしてください。  
P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

### ▶お手入れ箇所の除毛をしていますか？

製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。

### ▶UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れていませんか？

UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れている場合は、製品を使用しないでください。ウィンドウは交換できないため、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。

### ▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？

顔(鼻下、あご、もみあげ以外)、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、臀部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。

## お手入れの後に、皮膚に赤みが出る

### ▶少しの赤みは正常な反応で、通常すぐにおさまります。

## いつもよりも、お手入れ後の肌の反応が長く続く

### ▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？

P.15「出力レベルの設定」の項をお読みいただき、適切なレベルを設定してください。肌の反応が3日以上続く場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

## この製品を使用して、ひどい痛みを感じた

### ▶お手入れ箇所の除毛を適切に行ってていますか？

この製品を使用する前に除毛処理を行ってください。肌が敏感で除毛によって肌があれてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットし、また出力レベルを低く設定してお使いください。

### ▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？

顔(鼻下、あご、もみあげ以外)、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、臀部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。

### ▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？

出力レベルをご自分に適した設定へ下げてください。P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

### ▶UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れていませんか？

UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れている場合は、製品を使用しないでください。ウィンドウは交換できないため、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。

### ▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？

生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

## お手入れ効果が自分の満足するレベルではない

- ▶ご自分に合った出力レベルよりも低い設定で使用していませんか?  
P.15の「出力レベルの設定」の項をよく読み、出力レベルを適正にセットしてください。

- ▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか?  
P.17「使用方法」の項のステップ5をお読みください。

- ▶推奨される使用方法に従っていますか? (お手入れと次のお手入れの間隔があきすぎていませんか?)  
最初の4~5回は、2週間ごとのお手入れをおすすめしています。その後は、4~8週間ごとにお手入れを続けてください。最適なお手入れの頻度は、個人の体質や、また身体の部位によっても差があります。お手入れの効果が感じられない場合はお手入れの頻度を上げることをおすすめします。

- ▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか?  
生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

## お手入れ箇所で、ところどころにまた毛が生えてきた

- ▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか?  
P.17「使用方法」の項のステップ5をお読みください。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、  
フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせ願います。

# 保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて  
(必ずお読みください)

## 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、電源アダプタ(アタッチメント、掃除用クロス、ポーチを除く)

## 【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、  
フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

## 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。  
尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

## 【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。  
保証書の記載内容により無料修理いたします。

## 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間に内であれば、  
ご希望により有料で修理させていただきます。

## 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。  
尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN  
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

## 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ  
<http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

## 便 利 メ モ

お買い上げ日	年　月　日	お買い上げ 店名	TEL. ( )
--------	-------	-------------	----------

**ご使用の時、このような症状はありませんか？**

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグ  
をコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

**愛情点検**

## 仕 様

品 名	一般家庭用光美容器 フィリップス ルメア アドバンス
品 番	SC1998/70 , SC1997/70
電源アダプタ品番	S036NU2400150
電 源 方 式	交流式(専用電源アダプタ使用)
消 費 電 力	36W (レベル5照射時)
定 格 電 壓	AC100-240V (50/60Hz)
本 体 質 量	約362g (電源アダプタを除く)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

**株式会社 フィリップス・ジャパン**

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

ホームページアドレス  
<http://www.philips.co.jp/>



## 無料修理規定

### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤ 保証書の提示がない場合。
  - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

## 一般家庭用光美容器 フィリップス ルメア アドバンス 保証書

持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	一般家庭用光美容器 フィリップス ルメア アドバンス		
品 番	SC1998/70 , SC1997/70		
保 証 期 間	お買い上げ日より2年		
対 象 部 分	本体、電源アダプタ(アタッチメント、掃除用クロス、ポーチを除く)		
お 買 い 上 げ 日	年	月	日
お 客 様	ご住所		
	ご芳名		
	電話番号		
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号		

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。  
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

## 株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

## お問い合わせ

## フィリップスサポートセンター

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

0120-944-859

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.100.4215.1(05/18)

©2018 Philips Japan, Ltd.