

ATTENTION 大切なご案内


ソニッケアーキッズアプリの使い方



お持ちのスマートフォンまたはタブレットに専用アプリをダウンロードして、ソニッケアーキッズハンドルとBluetooth®で連携。楽しく歯磨きの方法を学びながら、正しい歯磨き習慣を身につけることができます。

プロファイルの作成/ソニッケアーキッズハンドルの登録

- App StoreもしくはGoogle Playで「ソニッケアーキッズ」と検索し、アプリをダウンロードします。※Google Playは2017年1月頃に対応予定です。
- ソニッケアーキッズアプリを起動します。
- 画面の指示に従ってお子様のプロファイルを作成します。
 - 1 「ここをタップしてはじめよう!」をタップします。
 - 2 お子様の写真を登録します。(スキップ可能です)
 - 3 お子様の名前を登録します。
- 画面の指示に従ってストーリーを進め、右の画面でお使いのソニッケアーキッズハンドルをプロファイルに登録します。
 - 1 右図4-1の画面で「ソニッケアーキッズ」をタップします。
 - 2 右図4-2の画面で歯ブラシの電源を入れて、アプリと歯ブラシを接続します。
※Bluetoothの設定画面から、ソニッケアーキッズハンドルを選択する必要はありません。
- 電源スイッチを押して歯磨きをはじめます。

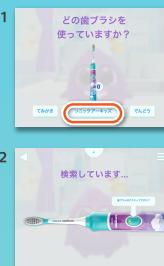

ソニッケアーキッズアプリを使って歯磨きをしましょう

- ソニッケアーキッズアプリを起動します。
- プロファイルを選択して「スタート」をタップします。
- 「はみがきスタート」をタップして、歯磨きのヒントを学んだら、ハンドルをアプリに接続し、アプリの指示に従って歯磨きをします。
- 歯磨きが終わったらスパークリーからのプレゼントをもらいましょう。



Bluetoothがつながらないとき

- スマートフォンやタブレットのBluetoothの設定がオンになっているか確認してください。
設定についてはお使いのスマートフォン等の取扱説明書を参照してください。
- ハンドルの電源スイッチのランプが緑色に点灯しているか確認してください。点灯していない場合、電源スイッチまたはブラッシングモードスイッチを1回押して電源をオンしてください。
- 複数のBluetooth機器をお使いになっている場所、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所では、本製品は正常に動作しない場合があります。周辺の機器をお切りになるなどして、改めて接続をお試しください。
- スマートフォンやタブレットに既に複数の製品がBluetoothで接続されている場合には、つながりにくくなることがあります。他の機器の接続を解除し、改めて接続をお試しください。

*以上をお試しいただいてもつながらない場合は、アプリ内のサポート>お問い合わせからお問い合わせくださいか、010-418-608 (受付時間 9:00~18:00、祝日を除く月~金曜日)にお問い合わせください。

MyPhilipsアカウントを作成しましょう

- 画面右上の【メニュー】>【保護者向け画面】で表示されるログイン画面から、MyPhilipsアカウントを作成することができます。
- MyPhilipsアカウントを作成いただくと、フィリップスの新製品やキャンペーン情報を定期的にメールでご案内します。(メールを受取らない設定も可能です。)
- また、アプリ上で「保護者向け画面」をお使いいただけるようになり、ごほうびの追加やはみがきポイントの付与、プロファイルの削除などができるようになります。
- MyPhilipsアカウントについて詳しくはWEBサイトをご覧ください。

アプリについて詳しくは、ソニッケアーキッズのWEBサイトをご覧ください。

<http://www.philips.co.jp/c-m-pe/sonicarekids>

こちらからもアクセスできます→



©2016 Philips Electronics Japan, Ltd. 記載されている製品名などの商標名は、Koninklijke Philips N.V.またはその会社の商標または登録商標です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

4235 021 21021

ソニッケアの正しい使い方

ソニッケアの使い方のコツ

- ブラシヘッドを水で数秒間ゆすいでぬらしてから使えます。
- 歯磨き粉をお使いになる場合、飛び散るのを防ぐためブラシヘッドをお口の中に入れてから電源を入れてください。
- ブラシヘッドは軽く当て、歯や歯ぐきに押しつけないようにしてください。
- ゴシゴシこらず、ソニッケアの動きに任せて歯の1本1本にブラシの毛先があたるようにゆっくりと動かしてください。
- 最良の効果を得るため、替ブラシは約3ヵ月ごとに交換してください。
- 1日朝晩2回のブラッシングをおすすめします。



モード設定について(やさしいモード・さらにやさしいモード)


- 「やさしいモード」はひとりで歯みがきができるお子様向けの標準モードです。ブラッシング時間は2分間に設定されています。
- 「さらにやさしいモード」は、「やさしいモード」をお使いになったときにソニッケアの振動に驚いたりくすぐったさを感じるなど、振動に慣れないお子様のために振動の大きさを抑えた特別モードです。
ブラッシング時間は始めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっています。
- イージースタート機能により、両モードとも、使い始めは通常時より小さい振動から始まり、徐々に大きくなっていき、15回目のブラッシングで通常の振動となります。
- 歯ブラシのブラッシングモードスイッチを押すと、「やさしいモード」と「さらにやさしいモード」が切り替わります。選択したモードには緑色のモードランプが点灯します。
- 初期設定は「やさしいモード」になっています。



詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お子様が磨き残しやすい場所

歯磨きの後には保護者の方が仕上げ磨きをしてあげましょう

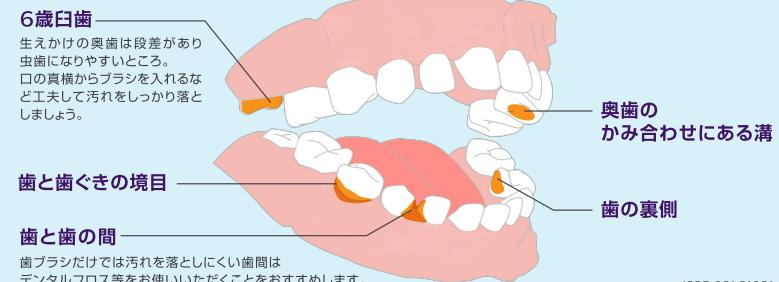

歯の健康のために、歯科医院で定期検診を受けましょう。